



La siguiente generación de test para Micotoxinas

Plataforma de análisis integrado Raptor® y kits Reveal® Q+ MAX test

Flujo de trabajo— Sólo añadir la extracción de la muestra

Flexibilidad— Test personalizado para adecuar su progreso

Conectividad— Integración eficaz de la información en su proceso





es la clave para mejorar la eficacia en su laboratorio de pruebas

Elimina los errores del operador

- Las tiras con código de barras contienen lote, caducidad e información del tipo de test
- ID de la muestra puede escanearse en el sistema
- Cartucho patentado Raptor asegura que el volumen correcto de la muestra está siendo analizado

Aumenta la productividad


- Sólo añade la muestra extraída y márchese. El sistema procesa y analiza resultados sin ayuda de ningún operador adicional.
- Con tres puertos separados, Raptor puede llevar a cabo tres muestras al mismo tiempo sin esperar más a muestras adicionales
- Los datos se transfieren automáticamente al sistema Data Manager

Raptor puede utilizarse con
Reveal Q+ and Reveal Q+
MAX test kits de Neogen



El cartucho de Raptor patentado :

- Facilita flexibilidad en sus pruebas
- Gran puerto de muestra con un volumen de muestra de gran tolerancia (350–450 µL)

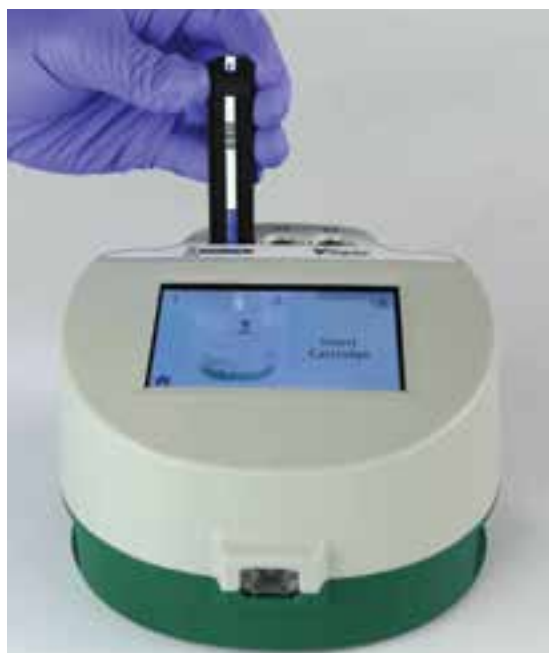

Ordering Information

Reveal Q+ para DON	8385
Reveal Q+ para Aflatoxin	8085
Reveal Q+ MAX para Aflatoxin	8088
Reveal Q+ MAX para DON	8388
Reveal Q+ MAX para Fumonisin	8888
Reveal Q+ MAX para Ochratoxin	8688
Reveal Q+ MAX para Zearalenone	8188
Reveal Q+ MAX para T-2/HT-2	8288
Plataforma de análisis integrado Raptor	9680
Cartuchos Raptor	9681

Por favor compruebe que su representante de Neogen la disponibilidad total de los kits Raptor autorizados Reveal Q+ y Reveal Q+ MAX test .

Base de análisis integrada Raptor

Raptor integra incubador y lector, automatizando los tests y facilitando control sobre los parámetros del test incluyendo el tiempo, volumen y temperatura. Raptor también tiene protecciones para evitar pruebas de una tira anterior. Las tiras de test con código de barras proveen de toda la información necesaria en cuanto al tipo de test y número de lote sin ayuda de operador adicional alguno. Raptor registra sus resultados con almacenamiento a bordo de hasta 2.000 tests. Los resultados de los test pueden descargarse en PC para archivo o análisis posterior, utilizando el software de Data Manager incluido con el sistema.

Pantalla Táctil

Gran pantalla táctil intuitiva con display que funciona con guantes y guías del operador con video

Ethernet/WiFi

La capacidad de Lab Information Management System (LIMS) significa que puede acceder a sus resultados cuando lo necesite

USB (3)

Tres puertos USB para una fácil conectividad a impresora externa y otros equipos

Puertos para muestras

Tres puertos de muestras independientes con capacidad de test 3 x 3. La tecnología "fluid front" empieza el test de forma automática

Diseño Sanitario

Puertos en la parte inferior del instrumento facilitan una fácil limpieza de derrames

Escáner de código de barras

El escáner permite introducir de forma instantánea el ID del test de la muestra e información del lote, reduciendo la cantidad de tipografía y la posibilidad de errores asociados a la introducción de datos



Test de Micotoxinas de Nueva Generación



División de Seguridad Alimentaria de Neogen

Desde los test lateral flow de fácil uso para numerosos contaminantes hasta definitivos ensayos para patógenos de DNA, Neogen ofrece productos de testado, experiencia, servicio y soporte para la industria alimentaria.

Soluciones de pruebas para Seguridad Alimentaria

- Toxinas naturales
- Alérgenos alimentarios
- Verificación Higiene/Sanitaria
- Organismos contaminantes
- Patógenos/bacteria alimentaria
- Residuos
- Medios de cultivo deshidratados

Formación y soporte

Neogen da apoyo continuo y formación de seguimiento, utilizando una combinación de formación virtual y presencial . Nuestro servicio técnico y especialistas de campo aplicado facilitan un apoyo técnico y profesional para cualquier pregunta que pueda surgir sobre cualquiera de nuestros productos.

LabLive

Ofrecemos servicio de una variedad de programas diseñados para optimizar sus resultados en la utilización de los productos Neogen . LabLive es una experiencia única que conecta laboratorio con laboratorio y nuestros expertos del servicio técnico con su laboratorio.

Neogen es líder en el desarrollo y marketing de soluciones para seguridad alimentaria

Contacte con nosotros hoy para poner nuestros productos y experiencia a trabajar para usted



Madrid

Puerto de Navafría, 12, 28935 Móstoles Madrid (España)
Tel. +34 91 616 42 68 • Fax. +34 91 616 59 46

Barcelona

AV. La Llana, 115-117, Polígono Industrial La Llana 8191 Rubí Barcelona (España)
Tel. +34 93 718 08 08 • Fax. +34 93 718 23 38

